


Navodila Za Uporabo

Skener las ValidorAI. Klinična diagnostika lasišča. Narejen za profesionalce.

Vaš AI pomočnik za nego las



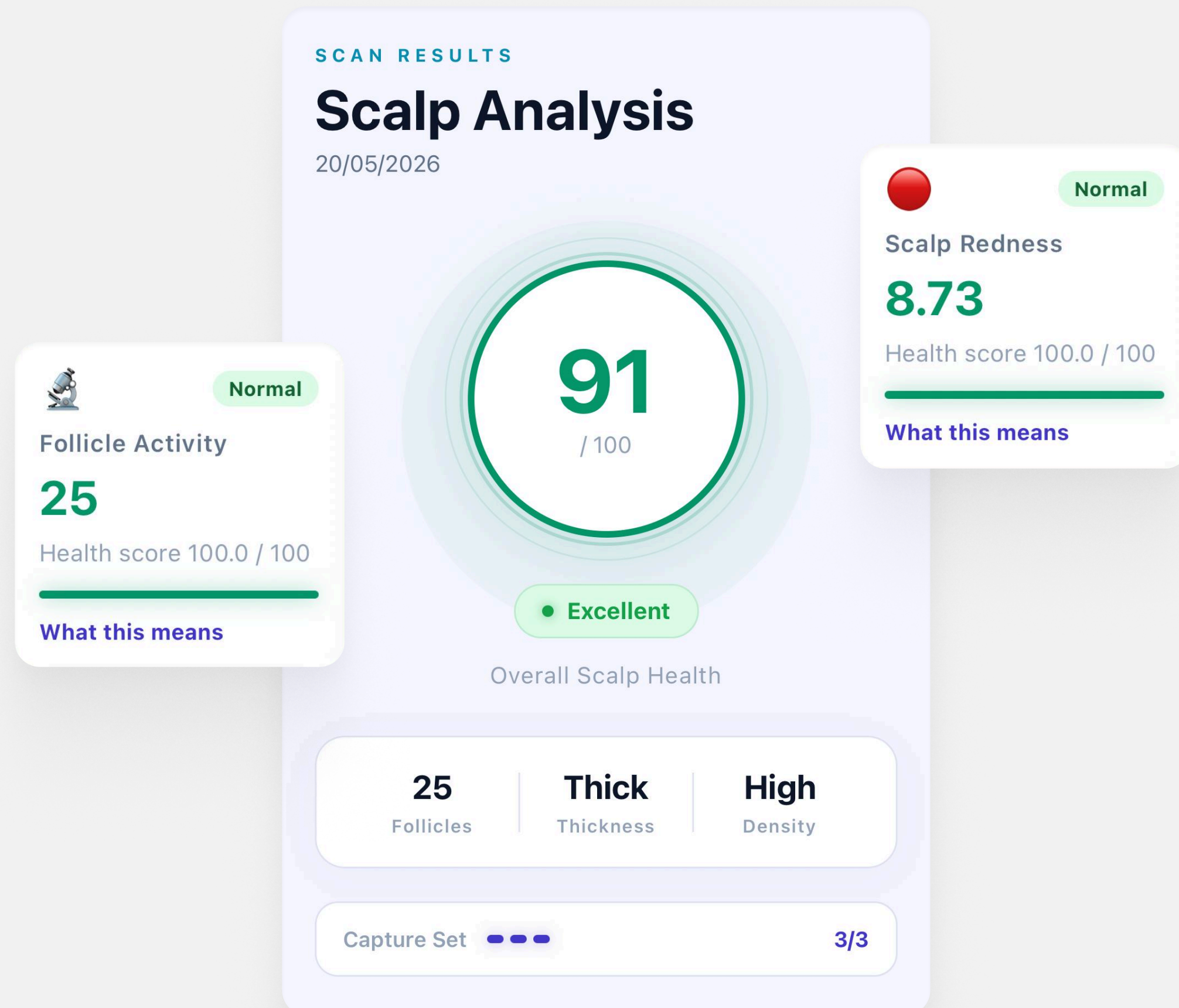

Ključne Funkcije Izdelka

✓ **100x povečava**

✓ **AI analiza, podprta s kliničnimi strokovnjaki**

✓ **Trije različni svetlobni spektri**

✓ **16 parametrov**


Gostota foliklov, premer foliklov, stanje poškodb, premer las, stanje prhljaja in več...

Indikatorske lučke

Zelena lučka: naprava je vključena

**Vklop / Fotografija**

1. Dolg pritisk za vklop/izklop
2. Kratek pritisk za zajem slike

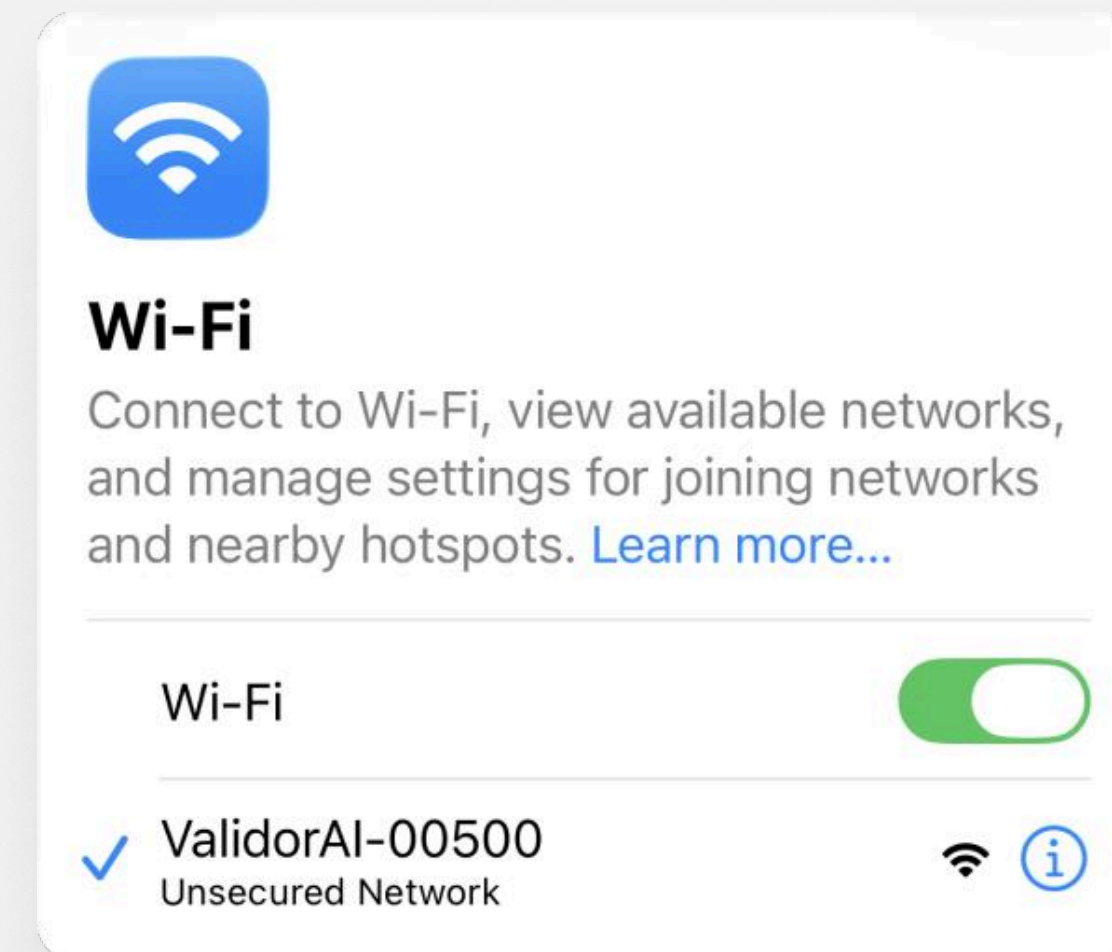**Wi-Fi**

Odprite nastavitve na mobilni napravi, pojdite na Wi-Fi in se povežite z ValidorAI-XXX

Kako Uporabljati

#1 Namestitev aplikacije

iOS/Android: poiščite »Validor app« v trgovini App Store ali Google Play.

#2 Vklop naprave

Pritisnite in držite gumb za vklop 3 sekunde, dokler ne utripne zelena lučka.

#3 Povezava Wi-Fi

V nastavitvah Wi-Fi na telefonu se povežite z »ValidorAI-XXX« (brez gesla).

#4 Začnite z analizo

Odprite aplikacijo, tapnite »Novo skeniranje« in sledite navodilom glede na vrsto skeniranja.



B2B SALON

Scan History

Review every supported scan for this patient, newest first.

New scan

LAST SCAN

Single Point

79

/ 100

• Good

Scalp Health

54

Follicles

Medium

Thickness

High

Density

LAST SCAN

Single Point

91

/ 100

• Excellent

Scalp Health

Pogosta vprašanja

❓ Ne morete se povezati z Wi-Fi omrežjem naprave?

Preverite, da je naprava vključena (utripa zelena lučka). Povežite se z »ValidorAI-XXX« in dovolite dovoljenja aplikaciji.

❓ V aplikaciji ni slike?

- iOS: omogočite dovoljenja za lokalno omrežje
- Android: če se pojavi poziv, izberite »Da«. Po potrebi izklopite pospeševanje omrežja.

❓ Wi-Fi prikazuje, da ni internetne povezave?

To je normalno. Po zajemu slik preklopite na domači Wi-Fi ali mobilne podatke.

❓ Politika vračila?

14-dnevno vračilo brez vprašanj.

HVALA!

care@validorai.com • www.ValidorAI.com